



VHERIN TERA TECH



VHERIN TERA TECH


adalah alat terapi kaki dengan teknologi medan elektromagnetik berdenyut PEMF yg dipadukan dengan teknologi gelombang Tera Premier THZ yg sangat trending saat ini di dunia kesehatan. merupakan solusi terapi canggih yang menggabungkan gelombang PEMF dan Tera Hetz untuk merangsang respons tubuh secara alami, meredakan ketegangan otot, dan meningkatkan sirkulasi darah. Dibuat sebagai investasi jangka panjang dalam kesehatan Anda dan Keluarga.





"Jika ada suatu cara untuk memanaskan tulang, Semua penyakit dapat diobati"

- Hippocrates Corpus

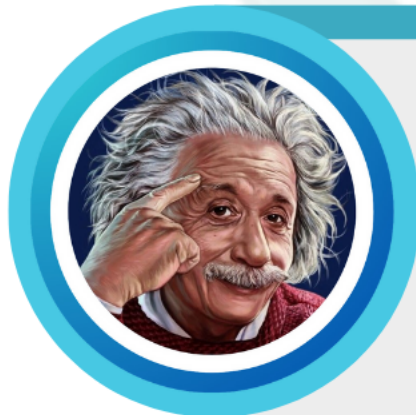


"Pengobatan masa depan adalah Pengobatan dengan Frekuensi"

-Albert Einstein

MANFAAT TERAPI VHERIN TERA TECH



Foot Reflexology Chart

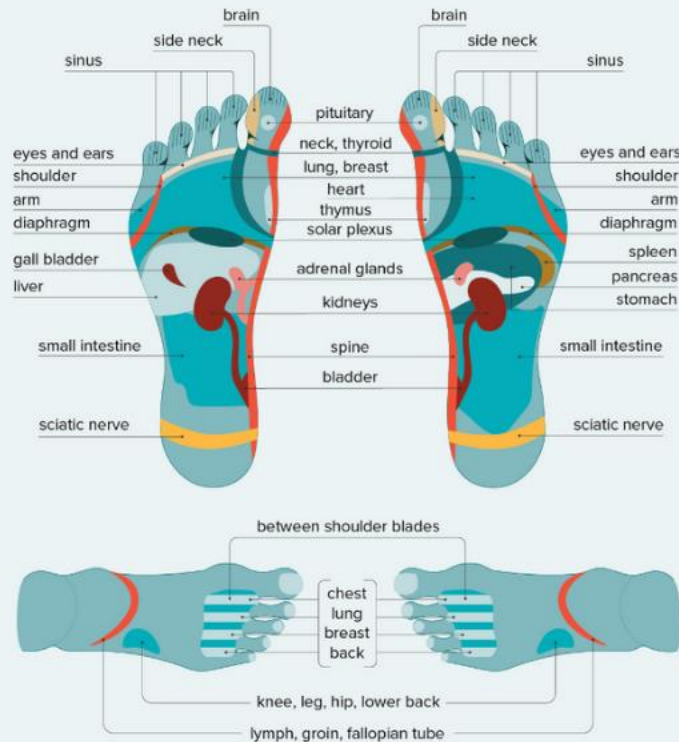

- Meredakan Ketegangan Otot
- Memperlancar peredaran darah
- Mengurangi Stres dan Kecemasan
- Meningkatkan Kualitas Tidur
- Pemulihan Cepat Setelah Aktivitas Fisik
- Mengurangi Nyeri Tubuh
- Meningkatkan Energi dan Vitalitas
- Mendukung Kesehatan Kulit
- Meningkatkan Konsentrasi Mental
- Meningkatkan metabolisme tubuh
- Memperbaiki dan mengaktifkan sel
- Mencegah obesitas (Diet)
- Mengurangi ketegangan otot
- Membantu produksi kolagen alami dari dalam tubuh
- Memperbaiki kerusakan limfa
- Menyeimbangkan fungsi organ tubuh
- Mengaktifkan Bonad (Kelenjar Reproduksi)
- Mencegah peradangan (anti inflamasi)
- Detoksifikasi
- Mencegah penuaan dini
- Mencegah & mengurangi kerutan pada kulit (mengencangkan kulit keriput)

ATURAN PAKAI VHERIN TERA TECH

Aturan Pemakaian :

- 30 menit sekali pemakaian, disarankan saat mau memulai aktivitas pagi atau menjelang tidur
- Penyetelan tombol pengatur suhu diatur sesuai kebutuhan, ada angka 1 sampai maks 10, makin tinggi angka nya makin hangat suhu yg dipancarkan
- Dapat digunakan 2 kali sehari



ATTENTION !

- Tidak untuk ibu hamil dan orang yang mamakai alat baterai di jantung
- Tidak untuk penderita demam diatas suhu 37°C,
- Tidak untuk bagi wanita yg sedang menstruasi
- Tidak disarankan orang yg pasca operasi (kecuali sudah lama operasinya)
- Tidak untuk yg menggunakan Pen (patah tulang) pada kaki , kecuali pen pada tangan masih diperbolehkan.
- Sangat Disarankan Minum 2 Gelas Air Mineral sebelum teraphy dan 1 gelas setelah teraphy
- Tidak mandi sebelum cukup 4 jam setelah teraphy.
- Penggunaan alat tidak boleh lebih dari 1 jam berturut-turut untuk mengurangi resiko kerusakan.

